


Recogiendo una Muestra de Materia Fecal

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE MATERIA FECAL

¡IMPORTANTE! Lea todas las instrucciones antes de recoger la muestra.

Ponga la muestra directamente en el envase de boca amplia que le fue provisto a tal fin.

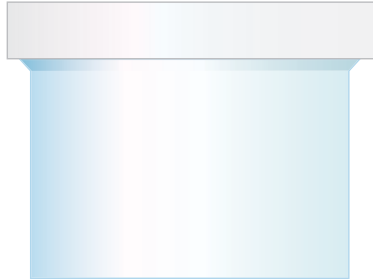


Cultivo de Materia Fecal

Agregue una porción suficiente de muestra contenida en el envase de boca amplia en el segundo frasco (C&S medium) llenándolo hasta que alcance la línea indicada como "Fill Line" (línea de carga completa) por su sigla en Inglés. Cierre la tapa firmemente y mézclelo bien. Si usted fallara en seguir este procedimiento, será necesario repetirlo. Escriba su nombre en la etiqueta, su fecha de nacimiento, y fecha y hora a la que guardó la muestra. Refrigere la muestra y retórnala a uno de nuestros Centros de Servicios a Pacientes el mismo día. Por favor lea las instrucciones al dorso para saber como mantener la muestra a una temperatura correcta.



Examen por parásitos y huevos (O&P) o Giardia EIA

El laboratorio ofrece dos métodos de colección para rastreo de parásitos o sus huevos y por Giardia EIA. Por favor siga las instrucciones de abajo que coincidan con el tipo de frasco que usted tiene:

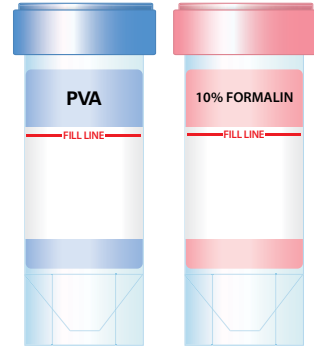

- Ponga muestra en cada uno de los frascos identificados como "Formalin 10%" y "PVA" o:
- Deposite la muestra en el frasco etiquetado como "ECOFIX"



Desde su frasco grande, agregue una porción suficiente de muestra hasta que el contenido alcance la línea de llenado (Fill Line en Inglés) de su frasco o frascos. Cierre la tapa firmemente y mezcle bien. Si usted fallara en seguir este procedimiento, será necesario repetirlo. Escriba su nombre en la etiqueta, su fecha de nacimiento, y fecha y hora a la que guardó la muestra. Conserve estos frascos a temperatura ambiente y retórnalos a uno de nuestros Centros de Servicios a Pacientes el mismo día.

Clostridium difficile, lactoferrin Fecal, leukocitos fecales, antígeno Helicobacteria pylori, sustancias reductoras, Grasa fecal, o pH de heces

Si usted esta recogiendo muestra para cualquiera de estos análisis, por favor deje algo de materia fecal en el envase grande. Cierre la tapa firmemente y mézclelo bien. Escriba en la etiqueta su nombre, su fecha de nacimiento, y fecha y hora a la que guardó la muestra. Refrigere la muestra y

ENTREGUE LA MUESTRA EN CUALQUIER CENTRO DE SERVICIO A PACIENTES

Para acceder a una lista de ubicación de nuestros Centros de Servicio navegue por Internet a: www.peacehealthlabs.org/locations

Continúa al reverso

Recogiendo una Muestra de Materia Fecal (continuado)

retórnela a uno de nuestros Centros de Servicios a Pacientes el mismo día. Por favor lea las instrucciones al dorso para saber como mantener la muestra a una temperatura correcta.

OBTENIENDO MUESTRA DE UN INFANTE

No guarde una muestra que haya estado en contacto directo con el pañal. Forre el pañal con material plástico para evitar que haya absorción. Usted podrá a continuación de la evacuación, recoger del plástico una muestra no contaminada y colocarla en el envase apropiado (como se le instruyo arriba)

SI SU MUESTRA REQUIERE REFRIGERACION

- Las muestras de material fecal que requieren refrigeración no pueden permanecer a temperatura ambiente.
- Inmediatamente luego de la obtención, guarde el frasco bien cerrado, puesto en una bolsa plástica en la nevera.
- Transporte la bolsa con la muestra dentro de otra bolsa plástica con hielo hasta nuestro laboratorio
- Si usted tuviera dudas o inquietudes con respecto a la obtención de su muestra, por favor llame a nuestra línea de Servicios a Clientes al 800-826-3616

MUESTRAS MULTIPLES

Si su doctor le ha pedido mas de una muestra para el mismo examen (por Ejemplo: Parásitos y huevos x 3) recoja muestras en días consecutivos (nunca en el mismo periodo de 24 horas). Retórnela a uno de nuestros Centros de Servicio a Pacientes el día que concluya la colección

RECUERDE

Asegúrese de recoger el material fecal de manera debida y así, evitar tener que repetir la prueba:

1. No envuelva la muestra en materiales absorbentes, (Por ejemplo: Papel higiénico, etc.) los cuales podrían absorber organismos que el doctor desea identificar.
2. No entregue material que haya estado en contacto con pañales.
3. Si su doctor le ha pedido mas de una muestra para el mismo examen (por Ejemplo: Parásitos y huevos x 3) recoja muestras en días consecutivos (nunca en el mismo periodo de 24 horas). Retorne las 3 muestras a uno de nuestros Centros de Servicio a Pacientes el día que concluya la colección.
4. Escriba su nombre en la etiqueta de todos los frascos, su fecha de nacimiento, y fecha y hora a la que guardó la muestra.
5. Conserve cada frasco de muestra a la temperatura requerida para cada examen[es] ordenado.
6. Lleve la muestra a nuestro laboratorio en el envase provisto el mismo día en que la haya obtenido.